
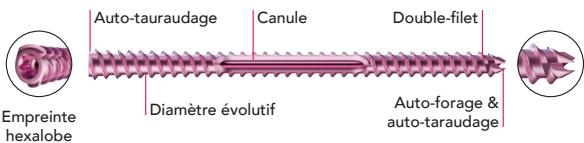



Une offre de vis de neutralisation dédiée aux fractures des métacarpiens et des phalanges.

UN DESIGN SPÉCIFIQUE AUX FRACTURES DIAPHYSAIRES

- Trois diamètres de vis : Ø2.0 mm, Ø3.0 mm et Ø4.0 mm.
- **Design non compressif** évitant l'accourcissement dans les cas de fractures transversales, obliques ou spiroïdes.
- **Diamètre évolutif** pour maximiser l'ancrage dans la corticale et optimiser le remplissage de l'isthme.
- **Vis canulées** pour un positionnement guidé.

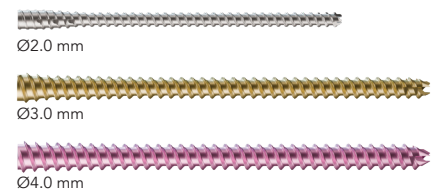

FOCUS Ø2.0 MM : OPTIONS DE MONTAGE POUR LES PHALANGES

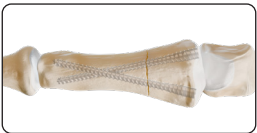

MONTAGE EN X



MONTAGE EN V




MONTAGE EN Y




MONTAGE SIMPLE

Xpert Hand.

PLAQUES DE 0.8MM POUR LA FIXATION DES PHALANGES

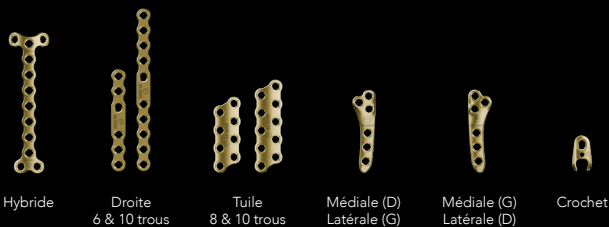

PLAQUES DE 1.3MM POUR LA FIXATION DES MÉTACARPIENS

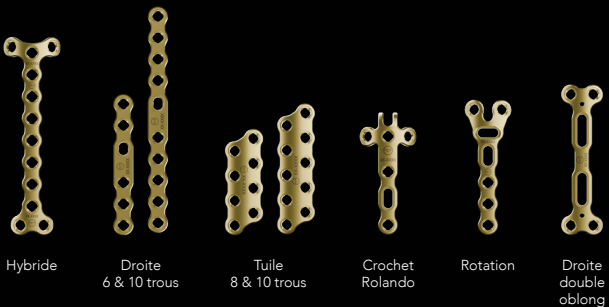

Inaxis.



Handmotion S.



newcliptechnics.com



Les implants de la gamme Xpert Hand sont dédiés à la fixation des fractures, ostéotomies et arthrodèses de la main chez l'adulte. Les implants de la gamme Stand-Alone Screws sont dédiés à la fixation des fractures, ostéotomies et arthrodèses osseuses chez l'adulte, appropriées à la taille du dispositif. Fabricant : Newclip Technics - Remis commercial FR - Gamme main - Ed.1 - 06/2026 - Dispositifs médicaux CE de classe IIb - CE1639 SGS BE. Avant toute utilisation des dispositifs Newclip Technics, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage. Ces produits doivent être manipulés et/ou implantés par des personnes formées, qualifiées et ayant pris connaissance de la notice d'utilisation.

NEWCLIP-TECHNICS



LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA CHIRURGIE DE LA MAIN.

Xpert Hand, Inaxis, Handmotion S.

Une instrumentation spécifique pour faciliter le geste chirurgical.

JAUGE DIFFERENTIELLE - FANTÔME

- **Instrument 2-en-1** pour la sélection de la taille de vis appropriée : mesure du **diamètre** grâce à la pointe selon l'isthme et de la **longueur** grâce à la jauge.




OUTIL DE RÉDUCTION

- **Conçu pour soutenir l'alignement des fragments** et la réduction de la fracture.
- **Instrument canulé** pour une mise en place guidée sur broche.
- **Extrémité pointue** permettant une insertion dans la première corticale sans pré-forage.
- **Code couleur** pour une identification rapide et efficace des instruments et des vis.



GUIDE D'INSERTION ET DE RETRAIT

- Double fonction :
 - Conçu pour l'**insertion** de la vis **en cas de troubles rotatoires**.
 - Permet le **retrait** en créant un ancrage lorsque la vis tourne librement **en cas de perte d'engagement cortical**.
- Instrument radio-transparent.

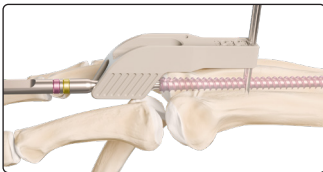

Technique opératoire


Un système complet et polyvalent de plaques pour la main.

UNE SOLUTION ADAPTÉE À CHAQUE INDICATION

- Plaques de phalanges 0.8 mm :
 - Vis verrouillées & non verrouillées Ø1.2 mm & Ø1.5 mm.
- Plaques de métacarpiens 1.3 mm :
 - Vis verrouillées & non verrouillées Ø2.0 mm & Ø2.3 mm.

UN SYSTÈME UNIQUE DE PLAQUES

- Plateforme SAT^(*)** qui combine verrouillage et compression, monoaxialité et polyaxialité.
- Angulation de $\pm 15^\circ$.

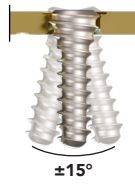

TECHNOLOGIE DE PLOT OBLONG VERROUILLÉ BREVETÉE

Compatible avec :

- Vis verrouillées.**
- Vis non verrouillées** pour ajuster le positionnement de la plaque ou finaliser la réduction en comprimant la plaque sur l'os.



TECHNIQUE DE RAPPEL


Instrumentation spécifique permettant de comprimer les fragments entre eux.



Technique opératoire


* Selected Angle Technology

Une plaque hybride capable de traiter à elle seule l'ensemble des fractures AO.

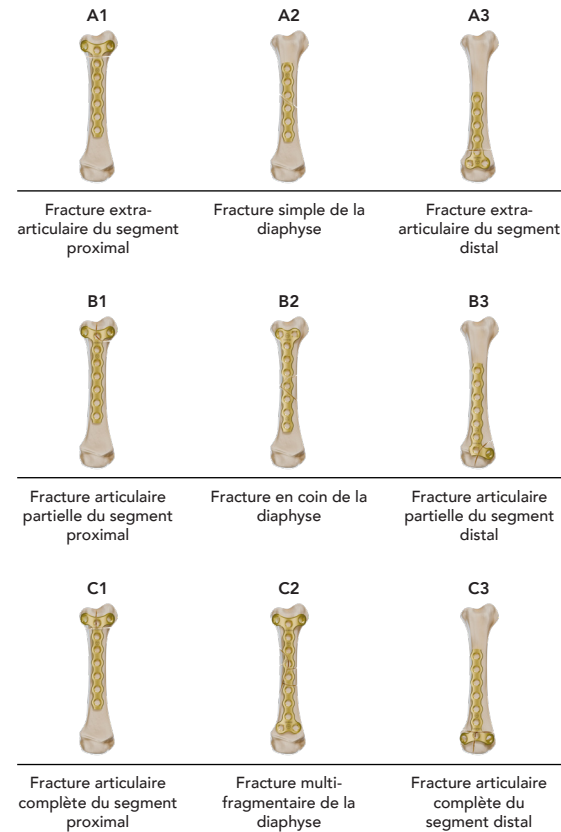

UNE PLAQUE, DIFFÉRENTS DESIGNS

- Plaques fracture-spécifiques et personnalisables :** formes droites, en L, en Y et en T.
- Flexibilité peropératoire :** zones dédiées pour la coupe et le cambrage des plaques pour traiter une grande variété de fractures.

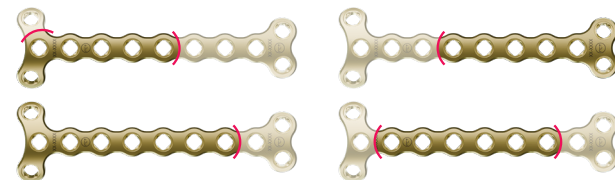

Des plaques dédiées à des indications spécifiques.

PLAQUES MÉDIALES & LATÉRALES

- Adaptées aux **voies d'abord médiale et latérale.**
- Conçues dans le but de minimiser l'irritation des tissus mous.
- Encoche pour la mise en place temporaire d'une broche, facilitant la fixation des condyles et le positionnement de la plaque.



PLAQUE CROCHET ROLANDO

- Design spécifique aux **fractures comminutives intra-articulaires à trois fragments** à la base du premier métacarpien.
- Crochet pour la stabilisation et le soutien de la comminution proximale.




PLAQUE DE ROTATION

- Dédiée aux **ostéotomies de correction rotationnelle.**
- Deux plots oblongs verrouillés orientés à 90° pour une **double correction en translation et en rotation.**
- Plot oblong transversal permettant jusqu'à 15°⁽¹⁾ de correction.



PLAQUE CROCHET AVULSION


- Conçue pour les **fractures par avulsion** (ex. fractures en maillet).
- Crochet permettant la réduction du fragment sans implant additionnel.

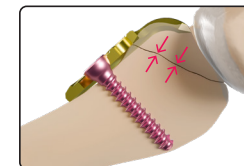

Une gamme de vis stand-alone pour le traitement des fractures des phalanges.





- Diamètre de vis Ø1.7 mm** avec canule de Ø0.65 mm.
- Vis canulées** pour un positionnement guidé.
- Deux types de design :
 - Vis auto-compressive (filet court).
 - Vis de neutralisation (entièrement fileté).

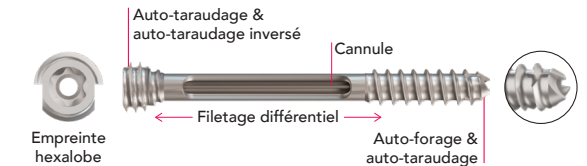

Une solution d'aide à la réduction brevetée.

INSTRUMENT DE RÉDUCTION

- Outil compact et mini-invasif** facilitant la réduction, la compression et la stabilisation de la fracture.
- Radio-transparent avec 3 marqueurs radio-opaques** pour un positionnement facile sous radioscopie.
- Gestion de la réduction selon deux plans : **en rotation et en translation.**

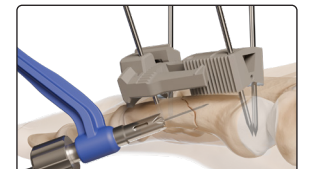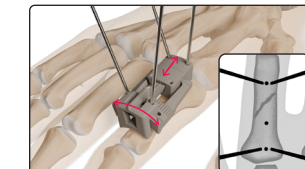

Technique opératoire