

CATALOGUE GÉNÉRAL

ORTHOPÉDIE - TRAUMATOLOGIE

DENTAIRE

NEURO CHIRURGIE, OPHTALMOLOGIE

INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRES





SOMMAIRE

NOVOMEDICS FRANCE 4

L'excellence au service de la régénération tissulaire

ORTHOPÉDIE ET TRAUMATOLOGIE 6

Tête fémorale
Chips spongieux
Chips d'os spongieux en seringue
Chips cortico-spongieux
Poudre d'os
Anneaux spongieux
Coin d'ostéotomie
Blocs spongieux
Cubes
Cylindres
J-Coin
Crête iliaque
Copeau de tibia
Diaphyse fémorale
Diaphyse tibiale
Diaphyse fibulaire
Diaphyse humérale
DBM chips a réhydrater
DBM X-Press
DBM en pâte
Fiberfill
Spongioflex
Cortiflex
Fascia lata
Epiflex (derme humain)
Tendons

DENTAIRE 23

Poudre d'os cortical
Bloc spongieux
Granulés
Lame corticale
Poudre d'os cortico-spongieux
DBM chips a réhydrater
DBM en pâte prête à l'emploi
Cortiflex
Granulés + HYA
Fascia lata
Epiflex (derme humain)

NEURO CHIRURGIE, OPHTALMOLOGIE 28

Tutopatch

INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRES 30

Partenaire idéal pour la gestion des infections

QUALITÉ ET SÉCURITÉ 31

NOVOMEDICS FRANCE : L'excellence au service de la régénération tissulaire

Fondée en 2016, NOVOMEDICS FRANCE s'est rapidement positionnée comme une référence incontournable dans le secteur de la biomédecine. En tant que banque de tissus de premier plan, notre mission est de fournir des solutions de haute qualité pour la réparation tissulaire, en soutenant les patients dans leur parcours de guérison.



À l'avant-garde de l'innovation médicale, nous nous engageons à répondre aux besoins croissants des praticiens et des patients grâce à une gamme de produits élaborés selon les normes les plus strictes de sécurité et d'éthique. Chaque tissu que nous distribuons provient de procédures rigoureuses de sélection et de traitement, assurant une intégrité et une performance optimales.

Chez NOVOMEDICS FRANCE, l'excellence est notre credo, l'éthique notre fondement, et la satisfaction des patients notre but ultime. Ensemble, faisons avancer la médecine régénérative pour bâtir un avenir où chaque lésion tissulaire trouve une solution adaptée et sûre.





- EXPERTISE RECONNUE
- ENGAGEMENT ÉTHIQUE
- GARANTIE DE QUALITÉ
- INNOVATION CONSTANTE



ORTHOPÉDIE ET TRAUMATOLOGIE

TÊTE FÉMORALE

Os compact lyophilisé d'origine humaine issu de donneur vivant ou décédé.



Hémitête, coupe longitudinale avec col



Hémitête, coupe longitudinale sans col

Indications

Pour implantation en vue de combler des défauts osseux :

- Lors des reprises d'arthroplasties (hanches, genoux).
- Après curetage des tumeurs osseuses ou d'ostéosarcomes.
- Lors de chirurgie réparatrice des ostéotomies avec ostéosynthèse.
- En cas de fracture ou de pseudoarthrose ;
 - Reconstructions osseuses.
 - Arthrodèses.

Référence	Description	Code LPPR
GT1800	Tête entière coupée	3332636
GT1902	Hémitête	3320107
DD1902	Hémitête	3320107
LAL0440FR	Hémitête Ø < 45 mm	3361862
LAL0444FR	Hémitête Ø > 45 mm	3361862
LAL0446FR	Hémitête, coupe longitudinale sans col	3361862
LAL0447FR	Hémitête, coupe longitudinale avec col	3361862
LAL0448FR	Tête fémorale, entière	3308810

CHIPS

Poudre d'os lyophilisée d'origine humaine, issue de donneur vivant.

La part de cortical dans les os cortico-spongieux est de 50% minimum.



Référence	Désignation	Volume / Granulométrie	Code LPPR
LAL0319FR	Chips d'os spongieux	V=5 cc G=2-5 mm	3303735
LAL0315FR	Chips d'os spongieux	V=15 cc G=2-5 mm	3342907
LAL0309FR	Chips d'os spongieux	V=30 cc G=2-5 mm	3351792
LAL0317FR	Chips d'os spongieux	V=45 cc G=2-5 mm	3349192
LAL0326FR	Chips d'os spongieux	V=5 cc G=5-8 mm	3303735
LAL0316FR	Chips d'os spongieux	V=15 cc G=5-8 mm	3342907
LAL0310FR	Chips d'os spongieux	V=30 cc G=5-8 mm	3351792
LAL0331FR	Chips d'os spongieux	V=45 cc G=5-8 mm	3349192
LAL0305FR	Chips d'os spongieux	V=5 cc G=2-8 mm	3303735
LAL0306FR	Chips d'os spongieux	V=15 cc G=2-8 mm	3342907
LAL0307FR	Chips d'os spongieux	V=30 cc G=2-8 mm	3351792
LAL0308FR	Chips d'os spongieux	V=45 cc G=2-8 mm	3349192
LAL0340FR	Chips d'os cortico-spongieux	V=15 cc G=2-8 mm	3342907
LAL0341FR	Chips d'os cortico-spongieux	V=30 cc G=2-8 mm	3351792

CHIPS D'OS SPONGIEUX EN SERINGUE

Os spongieux viro-inactivé d'origine humaine, issu de donneur vivant ou décédé.



Indications

La seringue possède une forme spéciale de conditionnement primaire pour les chips d'os spongieux, ce qui simplifie considérablement à la fois l'introduction des chips dans la zone défectueuse et leur réhydratation avec un milieu physiologique.

Référence	Désignation	Volume	Code LPPR
LAL0360FR	Chips d'os spongieux en seringue	V=7 cc	3331329
LAL0361FR	Chips d'os spongieux en seringue	V=15 cc	3375670
LAL0362FR	Chips d'os spongieux en seringue	V=30 cc	3363418

CHIPS CORTICO-SPONGIEUX

Os cortico-spongieux d'origine humaine, issu de donneur vivant ou décédé.



Indications

Pour implantation en vue de combler des défauts osseux :

- Lors des reprises d'arthroplasties (hanches, genoux).
- Après curetage des tumeurs osseuses ou d'ostéosarcomes.
- Lors de chirurgie réparatrice des ostéotomies avec ostéosynthèse.
- En cas de fracture ou de pseudoarthrose ;
 - Reconstructions osseuses.
 - Arthrodèses.

Référence	Désignation	Volume / Granulométrie	Code LPPR
DD2741	Chips d'os cortico-spongieux	V=5 cc G<10 mm	3393359
DD2742	Chips d'os cortico-spongieux	V=10 cc G<10 mm	3316560
DD2744	Chips d'os cortico-spongieux	V=15 cc G<10 mm	3362063
DD2743	Chips d'os cortico-spongieux	V=30 cc G<10 mm	3332139
DD2761	Chips d'os cortico-spongieux moulines	V=5 cc G=<5 mm	3393359
DD2746	Chips d'os cortico-spongieux moulines	V=10 cc G=<5 mm	3316560
DD2756	Chips d'os cortico-spongieux moulines	V=10 cc G=<8 mm	3316560
DD2748	Chips d'os cortico-spongieux moulines	V=10 cc G=<10 mm	3316560
DD2747	Chips d'os cortico-spongieux moulines	V=15 cc G=<5 mm	3362063
DD2749	Chips d'os cortico-spongieux moulines	V=15 cc G=<10 mm	3362063
DD2757	Chips d'os cortico-spongieux moulines	V=15 cc G=<8 mm	3362063
DD2750	Chips d'os cortico-spongieux moulines	V=30 cc G=<5 mm	3332139
DD2758	Chips d'os cortico-spongieux moulines	V=30 cc G=<8 mm	3332139
DD2753	Chips d'os cortico-spongieux moulines	V=30 cc G=<10 mm	3332139

POUDRE D'OS

Poudre d'os lyophilisé d'origine humaine, issu de donneur décédé.

La part de cortical dans les os cortico-spongieux est de 50% minimum.



Référence	Désignation	Volume / Granulométrie	Code LPPR
DD3408	Poudre d'os cortical	V=0.5 cc G=0,212-0,85 mm	3312088
DD3418	Poudre d'os cortical	V=0.5 cc G=1-2 mm	3312088
DD3401	Poudre d'os cortical	V=1 cc G=0,212-0,85 mm	3312088
DD3420	Poudre d'os cortical	V=1 cc G=0,5-1 mm	3312088
DD3412	Poudre d'os cortical	V=1 cc G=1-2 mm	3312088
DD3407	Poudre d'os cortical	V=3 cc G=0,212-0,85 mm	3332056
DD3421	Poudre d'os cortical	V=3 cc G=0,5-1 mm	3332056
DD3414	Poudre d'os cortical	V=3 cc G=1-2 mm	3332056
DD3422	Poudre d'os cortical	V=5 cc G=0,5-1 mm	3332060
DD3402	Poudre d'os cortical	V=5 cc G=0,212-0,85 mm	3332060
DD3415	Poudre d'os cortical	V=5 cc G=1-2 mm	3332060
DD3403	Poudre d'os cortical	V=10 cc G=0,212-0,85 mm	3332060

DD2778	Poudre d'os cortico-spongieux	V=0.5 cc G=0,212-0,85 mm	3312088
DD2779	Poudre d'os cortico-spongieux	V=0,5 cc G=1-2 mm	3312088
DD2770	Poudre d'os cortico-spongieux	V=1 cc G=0,212-0,85 mm	3312088
DD2775	Poudre d'os cortico-spongieux	V=1 cc G=1-2 mm	3312088
DD2771	Poudre d'os cortico-spongieux	V=3 cc G=0,212-0,85 mm	3332056
DD2776	Poudre d'os cortico-spongieux	V=3 cc G=1-2 mm	3332056
DD2772	Poudre d'os cortico-spongieux	V=5 cc G=0,212-0,85 mm	3332060
DD2777	Poudre d'os cortico-spongieux	V=5 cc G=1-2 mm	3332060

ANNEAUX SPONGIEUX

Os spongieux lyophilisé d'origine humaine, présentant une structure trabéculaire intacte.



Indications

Les anneaux spongieux ont été spécialement développés pour faciliter la reconstruction de la glène dans le cadre de la pose d'une prothèse totale de l'épaule.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Code LPPR
LAL0431FR	Anneau spongieux (1,5 mm)	26	10	3306627
LAL0433FR	Anneau spongieux (1,5 mm)	32	10	3306627
LAL0432FR	Anneau spongieux (1,5 mm)	26	20	3395855
LAL0434FR	Anneau spongieux (1,5 mm)	32	20	3394353
LAL0436FR	Anneau spongieux (7,7 mm)	26	10	3306627
LAL0437FR	Anneau spongieux (7,7 mm)	32	10	3306627
LAL0435FR	Anneau spongieux (7,7 mm)	26	20	3335675
LAL0430FR	Anneau spongieux (7,7 mm)	32	20	3394353

COIN D'OSTÉOTOMIE

Os spongieux viro-inactivé d'origine humaine, issu de donneur vivant ou décédé.



Indications

Pour implantation en vue de combler des défauts osseux :

- Lors des reprises d'arthroplasties (hanches, genoux).
- Après curetage des tumeurs osseuses ou ostéosarcomes.
- Lors de chirurgie réparatrice des ostéotomies avec ostéosynthèse.
- En cas de fracture ou de pseudoarthrose ;
 - Reconstructions osseuses.
 - Arthrodèses.

Référence	Désignation	Angle	Code LPPR
DD2001	Coin	22.5°	3313372
DD2002	Coin	45°	3361715



Coin cortico-spongieux

Indications

Les coins d'ostéotomie sont des greffons spongieux ou cortico-spongieux préformés, utilisés en ostéotomie corrective. C+TBA propose une large gamme de coins d'ostéotomie avec différents angles et tailles, pour répondre à l'indication et aux conditions anatomiques individuelles du patient.

Référence	Désignation	Angle	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Code LPPR
LAL0460FR	Coin spongieux	7°	< 45	7	3306627
LAL0462FR	Coin spongieux	7°	≥ 45	7	3394353
LAL0463FR	Coin spongieux	10°	< 45	7	3395855
LAL0465FR	Coin spongieux	10°	≥ 45	10	3394353
LAL0466FR	Coin spongieux	13°	< 45	10	3394353
LAL0468FR	Coin spongieux	13°	≥ 45	13	3394353
LAL0469FR	Coin spongieux	16°	< 45	13	3394353
LAL0470FR	Coin spongieux	16°	≥ 45	16	3394353
ALO410FR	Coin cortico-spongieux	15°	n.a	9,8-10,2	3395855



Coin spongieux

BLOCS SPONGIEUX

Os spongieux d'origine humaine, issu de donneur vivant et décédé.



Indications

Pour implantation en vue de combler des défauts osseux :

- Lors des reprises d'arthroplasties (hanches, genoux).
- Après curetage des tumeurs osseuses ou d'ostéosarcomes.
- Lors de chirurgie réparatrice des ostéotomies avec ostéosynthèse.
- En cas de fracture ou de pseudoarthrose ;
 - Reconstructions osseuses.
 - Arthrodèses.

Référence	Désignation	Taille / Volume	Code LPPR
DD2601	Blocs spongieux	V=1 cc 10x10x10 mm	3348689
DD2609	Blocs spongieux	V=3 cc 10x30x10 mm	3380233
DD2600	Blocs spongieux	V=12 cc 40x30x10 mm	3379632
DD2605	Blocs spongieux	V=15 cc 50x30x10 mm	3338308
LAL0406FR	Blocs spongieux	10x10x10 mm	3348867
LAL0409FR	Blocs spongieux	10x10x20 mm	3308307
LAL0400FR	Blocs spongieux	10x10x30 mm	3308307
LAL0401FR	Blocs spongieux	15x15x30 mm	3341960
LAL0416FR	Blocs spongieux	10x20x30	3341960

CUBES

Os massif viro-inactivé prélevé sur donneur vivant.



Référence	Désignation	Taille / Volume	Code LPPR
LAL0325FR	Cubes spongieux	V=10 cc 5x5x5 mm	3388068
LAL0314FR	Cubes spongieux	V=20 cc 5x5x5 mm	3345248

CYLINDRES

Os massif viro-inactivé prélevé sur donneur vivant.



Indications

Comblement osseux dans les chirurgies orthopédiques, dento chirurgicales, traumatologiques ou rachidiennes, notamment lorsque des volumes réguliers et stables sont requis. Conservation de la matrice osseuse naturelle et du collagène, garantissant un fort potentiel ostéoconducteur.

LAL0423FR	Cylindres spongieux	10x20 mm	3350249
LAL0425FR	Cylindres spongieux	12x20 mm	3335675
LAL0427FR	Cylindres spongieux	14x20 mm	3335675
LAL0424FR	Cylindres spongieux	10x30 mm	3335675
LAL0426FR	Cylindres spongieux	12x30 mm	3335675
LAL0428FR	Cylindres spongieux	14x30 mm	3335675

J-COIN

Os cortical d'origine humaine issu de donneur décédé.




Indications

Le J-Coin est constitué d'os cortical, ce qui contribue à une grande stabilité lors de l'insertion. Le dos arrondi offre une surface lisse pour les tissus mous adjacents. Développée dans les années 1980, l'opération J-Coin est une technique utilisée pour traiter les patients souffrant d'une récurrence de luxations de l'épaule après traumatisme.

Référence	Désignation	Taille / Largeur Top
ALO620FR	J-Coin	15x15x10 mm / 5 mm

Stabilisation articulaire

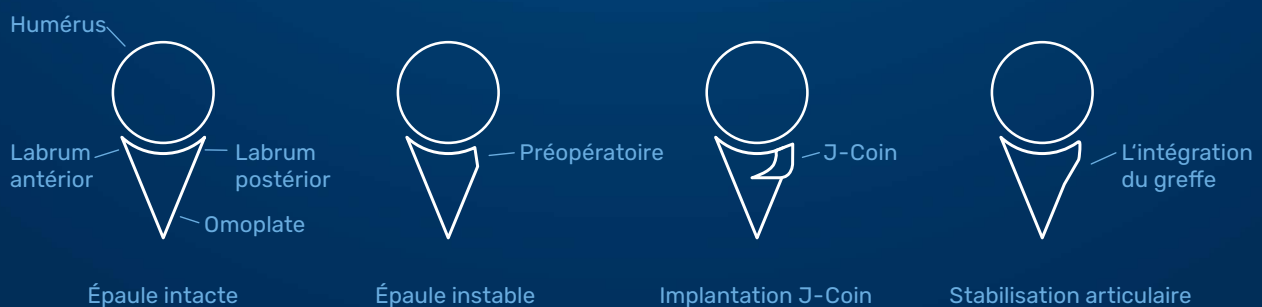

CRÊTE ILIAQUE

Os cortico-spongieux viro-inactivé d'origine humaine, issu de donneur décédé.



Indications

Pour implantation en vue de combler des défauts osseux :

- Lors des reprises d'arthroplasties (hanches, genoux).
- Après curetage des tumeurs osseuses ou d'ostéosarcomes.
- Lors de chirurgie réparatrice des ostéotomies avec ostéosynthèse.
- En cas de fracture ou de pseudoarthrose ;
 - Reconstructions osseuses.
 - Arthrodèses.

Référence	Désignation	Taille	Code LPPR
DD2706	Bi cortical	20x40 mm	3370000
DD2710	Bi cortical	20x60 mm	3370000
DD2716	Tri cortical	20x40 mm	3370000
DD2720	Tri cortical	20x60 mm	3370000
DD2722	Tri cortical	40x20 mm	3370000
DD2723	Tri cortical	60x20 mm	3370000

COPEAU DE TIBIA

Os massif viro-inactivé prélevé sur donneur décédé.



Indications

Pour implantation en vue de combler des défauts osseux :

- Lors des reprises d'arthroplasties (hanches, genoux).
- Après curetage des tumeurs osseuses ou d'ostéosarcomes.
- Lors de chirurgie réparatrice des ostéotomies avec ostéosynthèse.
- En cas de fracture ou de pseudoarthrose ;
 - Reconstructions osseuses.
 - Arthrodèses.

Référence	Désignation	Dimensions	Code LPPR
DD2102	Copeau de tibia	10-15 x 100 mm	Sans
DD2103	Copeau de tibia	10-15 x 200 mm	Sans

DIAPHYSE FÉMORALE

Os massif viro-inactivé d'origine humaine, issu de donneur décédé.



Indications

Pour implantation en vue de combler des défauts osseux :

- Lors des reprises d'arthroplasties (hanches, genoux).
- Après curetage des tumeurs osseuses ou d'ostéosarcomes.
- Lors de chirurgie réparatrice des ostéotomies avec ostéosynthèse.
- En cas de fracture ou de pseudoarthrose ;
 - Reconstructions osseuses.
 - Arthrodèses.

Référence	Désignation	Taille	Code LPPR
DD1802	Diaphyse fémorale	70 mm	Sans
DD1803	Diaphyse fémorale	100 mm	Sans
DD1804	Diaphyse fémorale	150 mm	Sans
DD1805	Diaphyse fémorale	250 mm (coupée dans le sens de la longueur)	Sans
DD1806	Diaphyse fémorale	Complète	Sans

DIAPHYSE TIBIALE

Os massif viro-inactivé d'origine humaine, issu de donneur décédé.



Indications

Pour implantation en vue de combler des défauts osseux :

- Lors des reprises d'arthroplasties (hanches, genoux).
- Après curetage des tumeurs osseuses ou d'ostéosarcomes.
- Lors de chirurgie réparatrice des ostéotomies avec ostéosynthèse.
- En cas de fracture ou de pseudoarthrose ;
 - Reconstructions osseuses.
 - Arthrodèses.

Référence	Désignation	Longueur	Code LPPR
DD2301	Diaphyse tibiale	50 mm	Sans
DD2302	Diaphyse tibiale	70 mm	Sans
DD2303	Diaphyse tibiale	100 mm	Sans
DD2305	Diaphyse tibiale	250 mm	Sans

DIAPHYSE FIBULAIRE

Os massif viro-inactivé d'origine humaine issu de donneur décédé.



Indications

Pour implantation en vue de combler des défauts osseux :

- Lors des reprises d'arthroplasties (hanches, genoux).
- Après curetage des tumeurs osseuses ou d'ostéosarcomes.
- Lors de chirurgie réparatrice des ostéotomies avec ostéosynthèse.
- En cas de fracture ou de pseudoarthrose ;
 - Reconstructions osseuses.
 - Arthrodèses.

Référence	Désignation	Longueur	Code LPPR
DD2400	Diaphyse fibulaire	10 mm	Sans
DD2401	Diaphyse fibulaire	50 mm	Sans
DD2402	Diaphyse fibulaire	70 mm	Sans
DD2403	Diaphyse fibulaire	100 mm	Sans
DD2404	Diaphyse fibulaire	150 mm	Sans
DD2406	Diaphyse fibulaire	Complet	Sans

DIAPHYSE HUMÉRALE

Os massif viro-inactivé d'origine humaine, issu de donneur décédé.



Indications

Pour implantation en vue de combler des défauts osseux :

- Lors des reprises d'arthroplasties (hanches, genoux).
- Après curetage des tumeurs osseuses ou d'ostéosarcomes.
- Lors de chirurgie réparatrice des ostéotomies avec ostéosynthèse.
- En cas de fracture ou de pseudoarthrose ;
 - Reconstructions osseuses.
 - Arthrodèses.

Référence	Désignation	Longueur	Code LPPR
DD1810	Diaphyse humérus	Complet	Sans

OS DÉMINÉRALISÉ OSTÉOINDUCTIF

DBM CHIPS A RÉHYDRATER



Indications

- Comblement osseux chez des patients présentant un risque de retard ou de mauvaise consolidation osseuse.
- Comblement de défauts osseux en chirurgie orthopédique, oncologie, neurochirurgie, stomatologie et chirurgie maxillo-faciale.
- En chirurgie orthopédique : comblement de kyste osseux, arthrodèse rachidienne.
 - Défauts osseux métaphysaires
 - Reconstruction osseuse après kystectomie ou résections tumorales
 - Pseudarthroses ou retards de consolidation
- En chirurgie maxillo-faciale : comblement kystique et alvéolaire, sinus lift, élévation de crête : avec mise en fonction différée des implants et d'une augmentation maxillaire afin d'améliorer la stabilité des implants.

Référence	Désignation	Granulométrie	Volume	Code LPPR
DD3532	DBM chips à réhydrater	0,212-0,85 mm	0,5 cc	Bientôt disponible
DD3510	DBM chips à réhydrater	0,212-0,85 mm	1 cc	Bientôt disponible
DD3530	DBM chips à réhydrater	0,212-0,85 mm	3 cc	Bientôt disponible
DD3531	DBM chips à réhydrater	0,212-0,85 mm	5 cc	Bientôt disponible
DD3533	DBM chips à réhydrater	1-2 mm	0,5 cc	Bientôt disponible
DD3516	DBM chips à réhydrater	1-2 mm	1 cc	Bientôt disponible
DD3518	DBM chips à réhydrater	1-2 mm	3 cc	Bientôt disponible
DD3519	DBM chips à réhydrater	1-2 mm	5 cc	Bientôt disponible
DD3505	DBM chips à réhydrater	1-3 mm	1 cc	Bientôt disponible
DD3515	DBM chips à réhydrater	1-3 mm	3 cc	Bientôt disponible
DD3506	DBM chips à réhydrater	1-3 mm	5 cc	Bientôt disponible
DD3507	DBM chips à réhydrater	1-3 mm	10 cc	Bientôt disponible
DD3509	DBM chips à réhydrater	1-3 mm	15 cc	Bientôt disponible
DD3508	DBM chips à réhydrater	1-3 mm	30 cc	Bientôt disponible

DBM X-PRESS

Sans réhydratation.



Indications

Pour implantation en vue de combler des défauts osseux :

- Lors des reprises d'arthroplasties (hanches, genoux).
- Après curetage des tumeurs osseuses ou d'ostéosarcomes.
- Lors de chirurgie réparatrice des ostéotomies avec ostéosynthèse.
- En cas de fracture ou de pseudoarthrose ;
 - Reconstructions osseuses.
 - Arthrodèses.

Référence	Désignation	Granulométrie	Volume	Code LPPR
DD3560	DBM X-PRESS	< 6 mm	2,5 cm ³	Bientôt disponible
DD3561	DBM X-PRESS	< 6 mm	5 cm ³	Bientôt disponible
DD3562	DBM X-PRESS	< 6 mm	10 cm ³	Bientôt disponible
DD3563	DBM X-PRESS	< 6 mm	15 cm ³	Bientôt disponible
DD3564	DBM X-PRESS	< 6 mm	20 cm ³	Bientôt disponible

DBM EN PÂTE

Matrice osseuse déminéralisée (os déminéralisé : 76%). Support : hyaluronate de sodium dans une solution tampon phosphate (PBS)



Indications

Pour implantation en vue de combler des défauts osseux :

- Lors des reprises d'arthroplasties (hanches, genoux).
- Après curetage des tumeurs osseuses ou d'ostéosarcomes.
- Lors de chirurgie réparatrice des ostéotomies avec ostéosynthèse.
- En cas de fracture ou de pseudoarthrose ;
 - Reconstructions osseuses.
 - Arthrodèses.

Référence	Désignation	Granulométrie	Volume	Code LPPR
DD3550	DBM en pâte	0,212- 0,85 mm	0,5 cm ³	Bientôt disponible
DD3551	DBM en pâte	0,212- 0,85 mm	1,0 cm ³	Bientôt disponible
DD3552	DBM en pâte	0,212- 0,85 mm	2,5 cm ³	Bientôt disponible
DD3553	DBM en pâte	0,212- 0,85 mm	5,0 cm ³	Bientôt disponible
DD3554	DBM en pâte	0,212- 0,85 mm	10,0 cm ³	Bientôt disponible

DBM Putty : Comblement osseux, extrémités, rachis, pelvis, applications dentaires

Référence	Désignation	Granulométrie	Code LPPR
AL081010	AlloHeal	V=1ml/cc	Sans
AL081025	AlloHeal	V=2,5ml/cc mm	Sans
AL081050	AlloHeal	V=5,0ml/cc	Sans
AL081100	AlloHeal	V=10ml/cc	Sans

FIBERFILL

Matrice osseuse déminéralisée en fibre.



Fiberfill est une matrice osseuse déminéralisée, conditionnée en fibre, spécialement conçue pour le comblement des défauts osseux. Facile à préparer, elle se réhydrate simplement avec une solution physiologique (NaCl ou antibiotique), facilitant ainsi son application en chirurgie orthopédique et maxillo-faciale.

Indications

Solutions innovantes pour la reconstruction osseuse :

- Comblement de pertes osseuses résiduelles.
- Comblement péri-implantaire.
- Comblement post-fractures et pseudoarthroses.
- Comblement après curetage de kystes ou tumeurs osseuses.
- Ostéomyélite chronique.


Référence	Désignation	Volume	Code LPPR
DD7000	Fiberfill	5cc	Sans
DD7001	Fiberfill	10cc	Sans
DD7002	Fiberfill	2,5cc	Sans

SPONGIOFLEX

Matrice osseuse spongieuse lyophilisée d'origine humaine.

SPONGIOFLEX est une matrice osseuse spongieuse lyophilisée, obtenue à partir de donneurs humains. Sa structure trabéculaire intacte assure une excellente intégration biologique et favorise la régénération osseuse. Ce produit est conçu pour répondre aux besoins de la chirurgie orthopédique, maxillo-faciale et dentaire.

Sa consistance souple et malléable facilite la manipulation et l'adaptation aux différentes formes de défauts osseux, offrant une solution efficace et biocompatible pour la reconstruction osseuse.

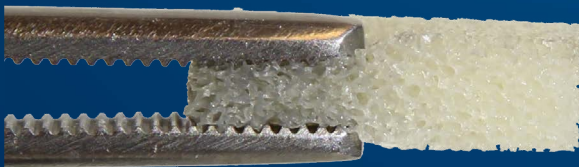

Indications

SPONGIOFLEX est indiqué pour :


- Le comblement des défauts osseux résiduels
- Les reconstructions osseuses après curetage de tumeurs ou kystes
- Le comblement péri-implantaire en chirurgie dentaire
- La stabilisation osseuse lors d'ostéotomies avec ostéosynthèse
- Les arthrodèses

Référence	Désignation	Dimensions	Épaisseur	Code LPPR
DD3570	Spongioflex	25 x 10 mm	6 mm	Sans
DD3571	Spongioflex	22 x 10 mm	10 mm	Sans
DD3572	Spongioflex	30 x 10 mm	10 mm	Sans

CORTIFLEX

Lamelle d'os cortical déminéralisé d'origine humaine issu, de donneur décédé.

Flexible après réhydratation.

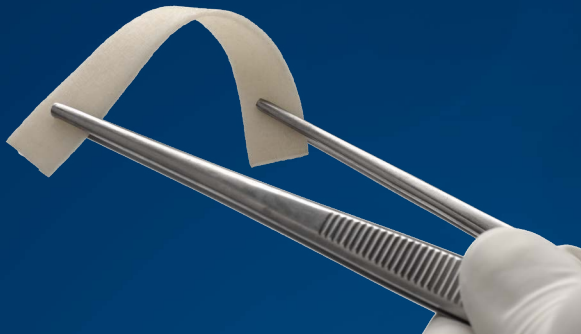

Indications

Alternatives aux greffes autologues avant la pose d'implants dentaires :

- Volume osseux sous-sinusal insuffisant
- Crête atrophiée de l'os maxillaire

Référence	Désignation	Épaisseur	Dimensions	Code LPPR
DD3543	Cortiflex	2 mm	15 x 25 mm	Sans
DD3545	Cortiflex	2 mm	15 x 30 mm	Sans
DD3540	Cortiflex	2 mm	15 x 50 mm	Sans
DD3546	Cortiflex	2 mm	15 x 60 mm	Sans
DD3548	Cortiflex	2 mm	20 x 25 mm	Sans
DD3549T	Cortiflex	2 mm	15 x 15 mm	Sans
DD3545T	Cortiflex	0,5 mm	15 x 30 mm	Sans
DD3548T	Cortiflex	0,5 mm	20 x 25 mm	Sans

FASCIA LATA

Fascia Lata à réhydrater, d'origine humaine, issu de donneur décédé.



Indications

- Augmentation autour d'implants placés immédiatement ou de manière retardée dans une alvéole après extraction.
- Augmentation crestale localisée pour implantation ultérieure.
- Reconstruction de la crête pour traitement prothétique.
- Obturation des défauts osseux.
- Régénération osseuse guidée pour les déhiscences osseuses.
- Procédures de régénération tissulaire guidée pour les défauts parodontaux.

Référence	Désignation	Dimensions	Code LPPR
DD3211	Fascia Lata	15 x 20 mm	Sans
DD3212	Fascia Lata	20 x 30 mm	Sans
DD3213	Fascia Lata	30 x 40 mm	Sans

EPIFLEX® Derme humain

Derme humain viro-inactivé acellulaire d'origine humaine, issu de donneur décédé. Epiflex® est une membrane de régénération osseuse résorbable.



Indications

- Remplacement du derme et tissu mou perdu ou insuffisant.
- Augmentation autour d'implants placés immédiatement ou de manière retardée dans une alvéole après extraction.
- Augmentation crestale localisée pour implantation ultérieure.
- Reconstruction de la crête pour traitement prothétique.
- Obturation des défauts osseux.
- Régénération osseuse guidée pour les déhiscences osseuses.
- Procédures de régénération tissulaire guidée pour les défauts parodontaux.

Référence	Désignation	Épaisseur	Dimensions	Code LPPR
DD4001	Epiflex®	0,3 - 0,8 mm	10 x 20 mm	Sans
DD4002	Epiflex®	0,3 - 0,8 mm	10 x 30 mm	Sans
DD4004	Epiflex®	0,3 - 0,8 mm	15 x 15 mm	Sans
DD4005	Epiflex®	0,3 - 0,8 mm	15 x 30 mm	Sans
DD4051	Epiflex®	> 0,8 mm	10 x 20 mm	Sans
DD4052	Epiflex®	> 0,8 mm	10 x 30 mm	Sans
DD4053	Epiflex®	> 0,8 mm	10 x 40 mm	Sans
DD4054	Epiflex®	> 0,8 mm	15 x 15 mm	Sans
DD4055	Epiflex®	> 0,8 mm	15 x 30 mm	Sans

TENDONS

Indications

Reconstruction de tendons et de ligaments.

	Référence	Désignation	Longueur	Code LPPR
	TK3107	Tendon du semi-tendineux	≥ 26 cm	Sans
	TK3108	Tendon du semi-tendineux	< 26 cm	Sans
	TK3109	Tendon du gracilis	≥ 20 cm	Sans
	TK3110	Tendon fibulaire complet	Antérieur ≥ 22 cm	Sans
	TK3111	Tendon fibulaire complet	Postérieur ≥ 22 cm	Sans
	TK3112	Tendon péroné complet	≥ 22 cm	Sans



Fig 1 : Tendons de semitendinosus, tiabialis gracialis et peroneus longus.

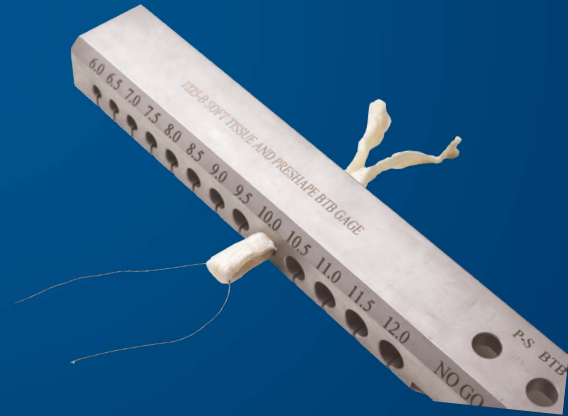


Fig 2 : Diamètre plié (FD) pour les tendons de semi-tendinose, tibialis, gracilis et peroneus longus : pour des spécifications, le tendon est plié sur sa longueur et tiré à travers les trous ϕ (différence de 0,5 mm) de l'instrument de mesure l'un après l'autre jusqu'à ce qu'il ne s'adapte plus à travers. Le diamètre précédent détermine la valeur.



DENTAIRE

POUDRE D'OS CORTICAL



La poudre d'os cortico-spongieux et cortical est un biomatériau qui favorise la régénération osseuse grâce à sa porosité, permettant une bonne intégration aux tissus et assurant une stabilité mécanique.

Indications

Utilisée pour combler les pertes osseuses (notamment autour des implants dentaires et après extraction), ainsi que pour des reconstructions osseuses complexes nécessitant un volume osseux important.

Applications principales :

- Greffes osseuses pour implants dentaires
- Régénération après extraction dentaire
- Régénération osseuse parodontale

Référence	Désignation	Épaisseur	Volume	Code LPPR
DD3408	Poudre d'os cortical	0,212-0,85 mm	0,5 cm ³	3312088
DD3401	Poudre d'os cortical	0,212-0,85 mm	1 cm ³	3312088
DD3407	Poudre d'os cortical	0,212-0,85 mm	3 cm ³	3332056
DD3402	Poudre d'os cortical	0,212-0,85 mm	5 cm ³	3378360
DD3420	Poudre d'os cortical	0,5-1 mm	1 cm ³	3312088
DD3421	Poudre d'os cortical	0,5-1 mm	3 cm ³	3332056
DD3422	Poudre d'os cortical	0,5-1 mm	5 cm ³	3378360
DD3418	Poudre d'os cortical	1-2 mm	0,5 cm ³	3312088
DD3412	Poudre d'os cortical	1-2 mm	1 cm ³	3312088
DD3414	Poudre d'os cortical	1-2 mm	3 cm ³	3332056
DD3416	Poudre d'os cortical	1-2 mm	5 cm ³	3378360

BLOCS SPONGIEUX

Référence	Désignation	Dimensions	Code LPPR
LAL0643FR	Bloc spongieux	10 x 10 x 10 mm	Sans
LAL0644FR	Bloc spongieux	10 x 10 x 20 mm	Sans
LAL0639FR	Bloc cortico-spongieux	10 x 10 x 10 mm	Sans
LAL0640FR	Bloc cortico-spongieux	10 x 10 x 20 mm	Sans

GRANULÉS

Référence	Désignation	Dimensions	Volume	Code LPPR
LAL0630FR	Chips d'os spongieux	< 2 mm	0,5 cm ³	Sans
LAL0631FR	Chips d'os spongieux	< 2 mm	1 cm ³	Sans
LAL0632FR	Chips d'os spongieux	< 2 mm	2 cm ³	Sans
LAL0634FR	Chips d'os spongieux	< 2 mm	4 cm ³	Sans
LAL0635FR	Chips cortico-spongieux	<2mm	0,5 cm ³	Sans
LAL0636FR	Chips cortico-spongieux	<2mm	1 cm ³	Sans
LAL0637FR	Chips cortico-spongieux	<2mm	2 cm ³	Sans
LAL0638FR	Chips cortico-spongieux	<2mm	4 cm ³	Sans

LAME CORTICALE

Référence	Désignation	Dimensions	Code LPPR
LAL0641FR	Lame corticale	25 x 10 x 1 mm	Sans
LAL0642FR	Lame corticale, 3 pcs	25 x 10 x 1 mm	Sans



POUDRE D'OS CORTICO-SPONGIEUX

Poudre d'os cortico-spongieux à réhydrater



Référence	Désignation	Epaisseur	Volume	Code LPPR
DD2778	Poudre d'os cortico-spongieux	0,212-0,85 mm	0,5 cm ³	3312088
DD2770	Poudre d'os cortico-spongieux	0,212-0,85 mm	1 cm ³	3312088
DD2771	Poudre d'os cortico-spongieux	0,212-0,85 mm	3 cm ³	3332056
DD2772	Poudre d'os cortico-spongieux	0,212-0,85 mm	5 cm ³	3378360
DD2779	Poudre d'os cortico-spongieux	1-2 mm	0,5 cm ³	3312088
DD2775	Poudre d'os cortico-spongieux	1-2 mm	1 cm ³	3312088
DD2776	Poudre d'os cortico-spongieux	1-2 mm	3 cm ³	3332056
DD2777	Poudre d'os cortico-spongieux	1-2 mm	5 cm ³	3378360

DBM Matrice osseuse déminéralisée (granules à réhydrater)



Indications

La matrice osseuse déminéralisée est largement utilisée dans les greffes osseuses pour favoriser la régénération et la réparation osseuse.

- Comblement des défauts osseux autour des implants dentaires, favorise la régénération osseuse après extraction ou en cas de perte osseuse importante.
- Traitement des défauts osseux causés par des maladies parodontales.

Référence	Désignation	Epaisseur	Volume	Code LPPR
DD3532	DBM	0,212-0,85 mm	0,5 cm ³	Bientôt disponible
DD3510	DBM	0,212-0,85 mm	1 cm ³	Bientôt disponible
DD3530	DBM	0,212-0,85 mm	3 cm ³	Bientôt disponible
DD3531	DBM	0,212-0,85 mm	5 cm ³	Bientôt disponible
DD3533	DBM	1-2 mm	0,5 cm ³	Bientôt disponible
DD3516	DBM	1-2 mm	1 cm ³	Bientôt disponible
DD3518	DBM	1-2 mm	3 cm ³	Bientôt disponible
DD3519	DBM	1-2 mm	5 cm ³	Bientôt disponible
DD3505	DBM	1-3 mm	1 cm ³	Bientôt disponible
DD3515	DBM	1-3 mm	3 cm ³	Bientôt disponible
DD3506	DBM	1-3 mm	5 cm ³	Bientôt disponible

DBM EN PÂTE / PUTTY (prêt à l'emploi)



Matrice osseuse déminéralisée qui est généralement plus facile à manipuler et à appliquer que la forme en poudre ou en granules. Elle est particulièrement utile dans les situations où la précision et la stabilité de l'application sont importantes.

Indication :

- Comblement des défauts osseux autour des implants dentaires ou après des extractions, la pâte DBM aide à favoriser la régénération osseuse dans les sites déficients.
- Régénération osseuse après extraction dentaire et/ou parodontale.

Référence	Désignation	Granulométrie	Volume	Code LPPR
DD3550D	DBM en pâte	0,212- 0,85 mm	0,5 cm ³	Bientôt disponible
DD3551D	DBM en pâte	0,212- 0,85 mm	1,0 cm ³	Bientôt disponible
DD3552D	DBM en pâte	0,212- 0,85 mm	2,5 cm ³	Bientôt disponible

CORTIFLEX® Cortical déminéralisé (flexible après réhydratation)



Référence	Désignation	Epaisseur	Dimensions	Code LPPR
DD3543	Cortiflex®	2 mm	15 x 25 mm	Sans
DD3545	Cortiflex®	2 mm	15 x 30 mm	Sans
DD3540	Cortiflex®	2 mm	15 x 50 mm	Sans
DD3546	Cortiflex®	2 mm	15 x 60 mm	Sans
DD3548	Cortiflex®	2 mm	20 x 25 mm	Sans
DD3549T	Cortiflex®	0,5 mm	15 x 15 mm	Sans
DD3545T	Cortiflex®	0,5 mm	15 x 30 mm	Sans
DD3548T	Cortiflex®	0,5 mm	20 x 25 mm	Sans

GRANULÉS + HYA

Substitut osseux allogénique imprégné d'hyaluronate



Indications

- Défauts osseux parodontaux
- Régénération des alvéoles après extraction (préservation des alvéoles)
- Régénération du tissu osseux manquant autour des implants dentaires
- Régénération des espaces autour des greffes osseuses en bloc
- Augmentation sinusale
- Augmentation horizontale et verticale


- **Acide hyaluronique (HyA)** : polysaccharide naturel présent dans la matrice extracellulaire de divers tissus, jouant un rôle clé dans l'hydratation, la lubrification et la signalisation cellulaire.
- **Innovation** : le système maxgraft® + HyA associe le matériau de substitution osseuse allogénique à l'hyaluronate de sodium (NaHyA), une forme de HyA plus soluble et stable, optimisée pour l'ingénierie tissulaire.
- **Propriétés fonctionnelles** : NaHyA présente une capacité exceptionnelle de rétention liquide grâce à ses nombreux groupes hydrophiles (-OH, -COO-) contenus dans sa structure moléculaire, favorisant l'adhésion et la cohésion du matériau.
- **Efficacité clinique** : l'intégration de NaHyA dans le greffon osseux permet la formation d'un matériau homogène et viscoélastique après hydratation, facilitant la manipulation et l'adaptation du greffon sur le site chirurgical.

Référence	Désignation	Volume / Granulométrie	Code LPPR
LAL0540FR	Chips d'os	V=1ml/cc G = <0.25mm	Sans
LAL0541FR	Chips d'os	V=2ml/cc G = <0.25mm	Sans
LAL0542FR	Chips d'os	V=5ml/cc G = <0.25mm	Sans
LAL0543FR	Chips d'os	V=10ml/cc G = <0.25mm	Sans
LAL0535FR	Chips d'os spongieux	V=1ml/cc G= 0.25-1mm	Sans
LAL0536FR	Chips d'os spongieux	V=2ml/cc G= 0.25-1mm	Sans
LAL0537FR	Chips d'os spongieux	V=5ml/cc G= 0.25-1mm	Sans
LAL0538FR	Chips d'os spongieux	V=10ml/cc G= 0.25-1mm	Sans
LAL0530FR	Chips d'os cortico-spongieux	V=1ml/cc G= 0.25-1mm	Sans
LAL0531FR	Chips d'os cortico-spongieux	V=2ml/cc G= 0.25-1mm	Sans
LAL0532FR	Chips d'os cortico-spongieux	V=5ml/cc G= 0.25-1mm	Sans
LAL0533FR	Chips d'os cortico-spongieux	V=10ml/cc G= 0.25-1mm	Sans

Quelques gouttes sur votre allogreffe adhésive !

Hydratation :

Environ 0,8 ml de solution saline pour 1 ml de cette solution

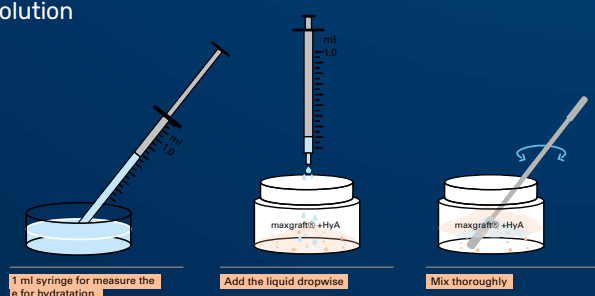

Conseils de manipulation :

- Utilisez une seringue de 1 ml pour mesurer le volume destiné à l'hydratation
- Visez une consistance collante et relativement sèche plutôt qu'une consistance liquide



FASCIA LATA PATCH DENTAIRE

Utilisé principalement dans les chirurgies réparatrices et la régénération des tissus mous. Ce type de greffon est très utilisé en chirurgie dentaire.

Indication :

- Régénération des tissus mous péri-implantaires
- Reconstruction post-extractionnelle et augmentation de crête alvéolaire
- Greffes gingivales et régénération parodontale
- Correction des défauts gingivaux liés aux maladies parodontales
- Régénération tissulaire après résection gingivale ou interventions implantaires
- Traitement des pertes tissulaires buccales et gingivales



Référence	Désignation	Dimensions	Code LPPR
DD3211	Fascia Lata	15 x 20 mm	Sans
DD3212	Fascia Lata	20 x 30 mm	Sans
DD3213	Fascia Lata	30 x 40 mm	Sans

EPIFLEX® Derme humaine (acellulaire, lyophilisée)



Référence	Désignation	Épaisseur	Dimensions	Code LPPR
DD4001	Epiflex®	0,3 - 0,8 mm	10 x 20 mm	Sans
DD4002	Epiflex®	0,3 - 0,8 mm	10 x 30 mm	Sans
DD4004	Epiflex®	0,3 - 0,8 mm	15 x 15 mm	Sans
DD4005	Epiflex®	0,3 - 0,8 mm	15 x 30 mm	Sans
DD4051	Epiflex®	> 0,8 mm	10 x 20 mm	Sans
DD4052	Epiflex®	> 0,8 mm	10 x 30 mm	Sans
DD4053	Epiflex®	> 0,8 mm	10 x 40 mm	Sans
DD4054	Epiflex®	> 0,8 mm	15 x 15 mm	Sans
DD4055	Epiflex®	> 0,8 mm	15 x 30 mm	Sans

NEURO CHIRURGIE, OPHTALMOLOGIE

TUTOPATCH

Membrane de collagène pour le renforcement, la reconstitution et la substitution des tissus conjonctifs.

TUTOPATCH est une membrane de collagène obtenue par préparation du péricarde bovin avec des solvants et stérilisé aux rayons gamma. elle est acellulaire et non réticulé.




Référence	Désignation	Taille	Code LPPR
68366	Tutopatch	140 mm x 200 mm	Sans
68355	Tutopatch	120 mm x 160 mm	Sans
68367	Tutopatch	80 mm x 110 mm	Sans
68354	Tutopatch	60 mm x 140 mm	Sans
68360	Tutopatch	50 mm x 110 mm	Sans
68362	Tutopatch	70 mm x 80 mm	Sans
68353	Tutopatch	60 mm x 80 mm	Sans
68352	Tutopatch	40 mm x 100 mm	Sans
68357	Tutopatch	20 mm x 100 mm	Sans
68351	Tutopatch	40 mm x 50 mm	Sans
68358	Tutopatch	30 mm x 40 mm	Sans
68350	Tutopatch	20 mm x 30 mm	Sans
68361	Tutopatch	15 mm x 30 mm	Sans
68356	Tutopatch	15 mm x 20 mm	Sans
68364	Tutopatch	3 mm x 120 mm	Sans



INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRES

Partenaire idéal pour la gestion des infections

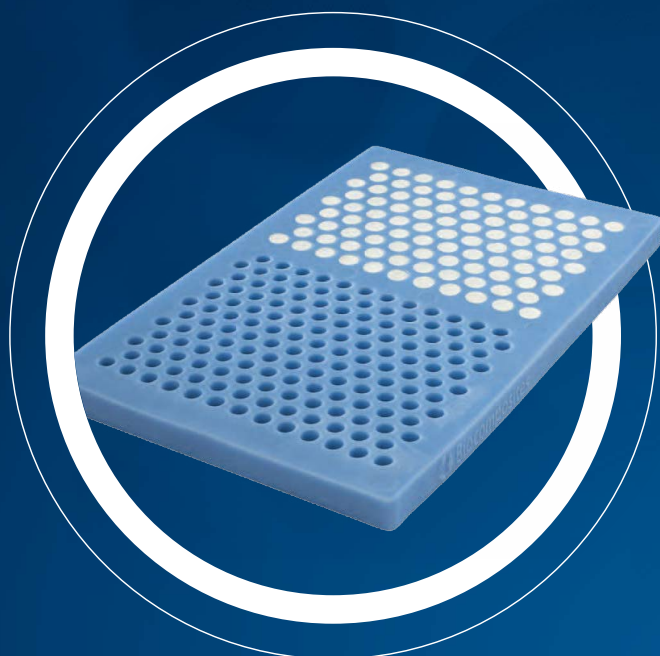

STIMULAN® est un sulfate de calcium, porteur d'antibiotiques, aisément absorbable, conçu spécifiquement pour gérer les infections des défauts et sites opératoires de façon proactive, avec une flexibilité inégalée et une application chirurgicale sans pareil.

- La seule matrice de calcium approuvée pour une utilisation dans les tissus mous et osseux.
- Approuvée pour un mélange avec la vancomycine, gentamicine et tobramycine.
- Peut être placée directement au cœur des zones infectées et non-infectées.

STIMULAN® Rapid cure

<i>Volume de la pâte</i>	<i>Volume des granules</i>	<i>Références</i>
5 cc	12 cc	620-005
10 cc	25 cc	620-010
20 cc	50 cc	620-020

STIMULAN® Kit

<i>Volume de la pâte</i>	<i>Volume des granules</i>	<i>Références</i>
5 cc	12 cc	600-005
10 cc	20 cc	600-010

STIMULAN® Bullet Mat and introducer

<i>Volume de la pâte</i>	<i>Volume des granules</i>	<i>Références</i>
7 mm x 20 mm	10 mm diamètre alésé (minimum)	660-001
9 mm x 20 mm	12 mm diamètre alésé (minimum)	660-001

QUALITÉ & SÉCURITÉ

REPLACEMENT OSSEUX HUMAIN

- Une variété de matériaux est disponible pour la régénération du tissu osseux après un traumatisme, une inflammation ou une ablation de tumeur. Bien que les greffes de tissus autogènes (propres aux patients) ne présentent aucun risque de réponse immunologique, leur disponibilité est limitée et le prélèvement est fréquemment associé à la douleur et à la morbidité du site donneur.
- L'utilisation de tissus allogéniques traités constitue une excellente alternative aux greffes autologues. Diverses études montrent que l'os allogénique traité et l'os autologue ne diffèrent pas dans leur compatibilité immunologique en ce qu'aucun anticorps circulant n'a pu être détecté chez les patients qui ont reçu des allogreffes. En outre, il a été confirmé que les allogreffes et les autogreffes étaient radiographiquement, histologiquement et morphologiquement égales dans leur incorporation finale.

DON ET APPROVISIONNEMENT DE TISSU

- Les C+TBA allogreffes osseuses sont dérivées de donneurs volontaires et sont prélevées conformément aux normes de qualité et de sécurité spécifiées dans les directives européennes.
- Plus de 99% de greffes osseuses C+TBA proviennent de têtes fémorales des donneurs vivants réséquées lors d'une arthroplastie totale de la hanche. Les allogreffes corticales et cortico-spongieuses sont également dérivées du fémur ou des tibias distaux des donneurs décédés.
- Le prélèvement, normalisé par un protocole prédéfini, est effectué par des centres de prélèvement certifiés. Tous les dons de tissus sont basés sur des critères d'exclusion stricts concernant l'état de santé du donneur.

TEST DES DONNEURS

- Le tissu donné n'est libéré pour la purification qu'après avoir passé une inspection approfondie, y compris dépistage sérologique strict pour exclure les risques d'infection potentiels. En plus du dépistage des anticorps (Ab), des tests d'acides nucléiques (NAT) sont effectués pour garantir la sécurité des greffes.


<i>Agent infectieux</i>	<i>Test</i>	<i>Spécificité</i>
Virus de l'hépatite B (VHB)	HBsAg, NAT	Négatif
Virus de l'hépatite C (VHC)	Ab, NAT	Négatif
Virus immunodéficitaire humain (VIH 1/2, Ag p-24)	Ab, NAT	Négatif
Treponema pallidum	Anticorps (Ab)	Négatif
HTLV	Retrovirus	Négatif

PROCÉDURE D'INACTIVATION VALIDÉE

- En plus des tests des donneurs, des étapes de purification très efficaces sont réalisées, à savoir l'immersion dynamique dans l'éthanol, le traitement au peroxyde d'hydrogène et le rayonnement gamma (pour des informations détaillées voir page suivante). La fiabilité et la reproductibilité des étapes de nettoyage ont été validées par un laboratoire d'essai indépendant conformément aux directives internationales.
- Des virus modèles pour les « virus enrobés » (HBV) et les virus à ADN non enrobés (Parvovirus PPV) ainsi que les virus enrobés (VIH, VHC, HTLV) et l'ARN non enrobé (HAV) ont été utilisés lors de la validation. La méthode a montré une efficacité générale pour inactiver tous les virus de test $\geq 6,0 \log_{10}$ et est donc considérée comme efficace pour éliminer les contaminants viraux potentiels.

NOVOMEDICS

France — banque de tissus Metz —

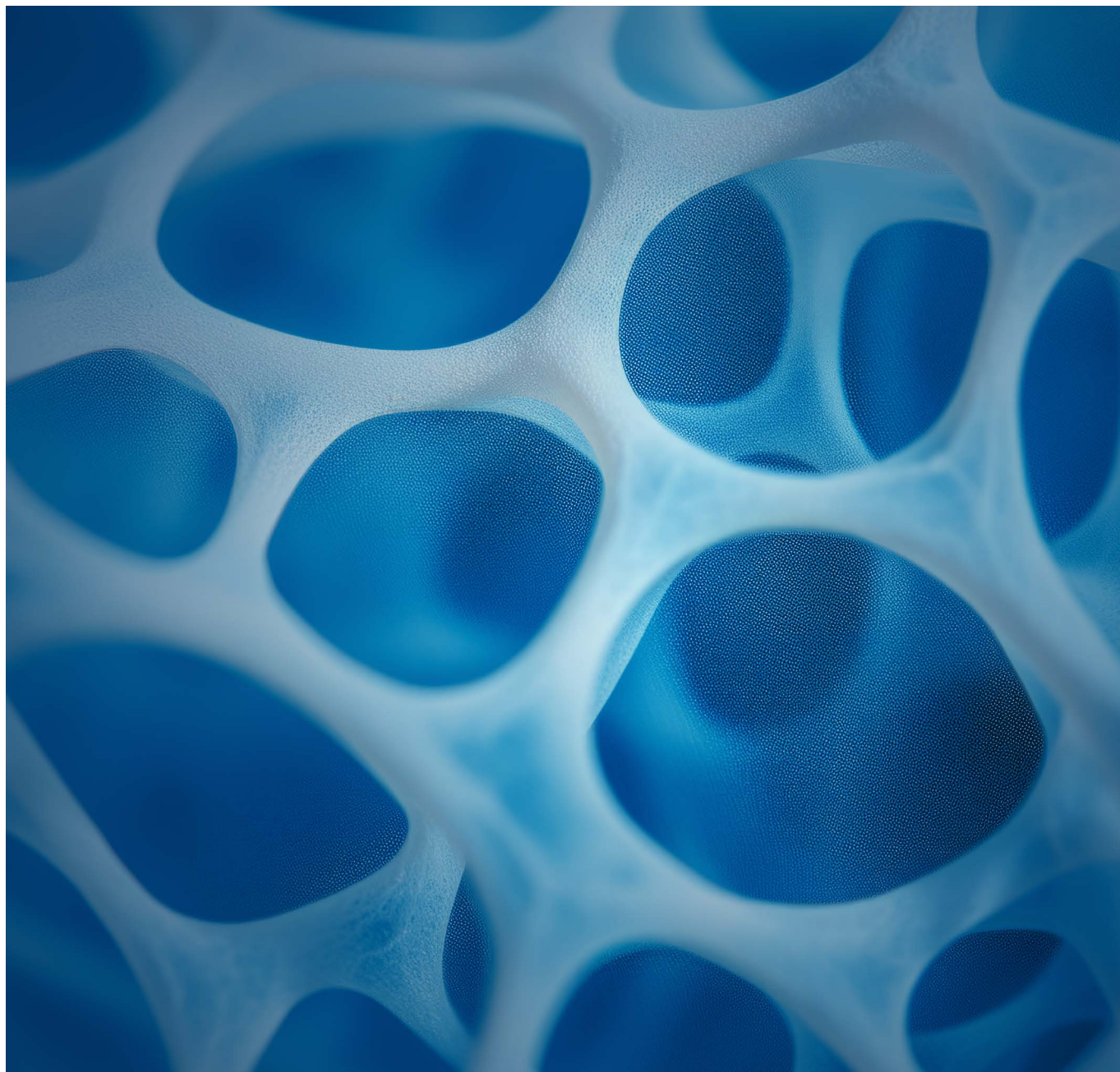

■ 4 rue La Fayette - 57000 METZ - FRANCE

■ 03 87 64 23 01

■ info@novomedics-france.fr

■ www.novomedics-france.fr

